

Smartbibi
NASAL

AVVERTENZE:
Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Non sono noti fenomeni di interazione con altri farmaci. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento, consultare il medico e informare il fabbricante. In caso di ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti, evitare l'uso del prodotto. Se i sintomi persistono dopo 3-5 giorni consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore dopo l'uso. L'uso nei bambini deve essere effettuato con la supervisione di un adulto. In caso di gravidanza o allattamento, assumere il prodotto sotto controllo medico.

CONSERVAZIONE:
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce alla confezione integra e correttamente conservata. Conservare a temperatura ambiente evitandone l'esposizione a fonti dirette di luce e calore e/o ad un'eccessiva umidità ambientale; evitare il contatto con l'acqua. Una volta aperto utilizzare entro 1 mese.

COMPOSIZIONE:
Acqua, Sodio ialuronato, Cloruro di sodio, Acqua distillata di Timo, Potassio Fosfato Monobasico, Potassio Fosfato Dibasico, Potassio sorbato.

Fabbricante/Manufacturer:
GRICAR CHEMICAL srl
Via San Giuseppe, 18/20
Brugherio (MB)



Smartbibi
NASAL



**NATURALMENTE
SENZA LATTOSIO
SENZA GLUTINE**

DISPOSITIVO MEDICO

15ml

Spray nasale
soluzione salina ipertonica
acido ialuronico
Decongestionante in caso di Riniti



Smartbibi
NASAL

SMARTBIBI NASAL è uno spray nasale di soluzione salina ipertonica al 3%, con l'aggiunta di acido ialuronico. **SMARTBIBI NASAL** ha un'azione decongestionante sulla mucosa nasale oltre ad un effetto fluidizzante sul muco e aiuta il drenaggio delle secrezioni ed è quindi utile per mantenere puliti i passaggi nasali, soprattutto in caso di raffreddore, rinite allergica, rinosinusite e sinusite. **SMARTBIBI NASAL** è utile per migliorare il decorso post-chirurgica delle cavità nasali o il corso di rinosinusite acuta e nasofaringite.

MODALITÀ D'USO:
Agitare prima dell'uso. Al primo utilizzo o dopo un prolungato periodo di inutilizzo, azionare più volte l'erogatore fino alla prima erogazione di prodotto. Per attivare l'applicatore, premere con 2 dita sulla base dell'erogatore.

- 1 nebulizzazione per narice fino a tre volte al giorno per bambini da 3 a 12 anni
- 1 o 2 nebulizzazioni per narice fino a quattro volte al giorno dai 12 anni in su

ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016
GMP CFR21 FDA

CE 0477 15ml e
REPRODUCTION OF MEDICAL DEVICE

Data ultima revisione: 04/03/2020
Date of last revision:




Smartbibi
NASAL



**NATURALMENTE
SENZA LATTOSIO
SENZA GLUTINE**

DISPOSITIVO MEDICO

15ml

Spray nasale
soluzione salina ipertonica
acido ialuronico
Decongestionante in caso di Riniti





LOT



GIÁM ĐỐC MARKETING
DS. Lê Thanh Nội

<https://trungtamthuoc.com/>

INGREDIENTI:

Vedi astuccio estemo

NATURALMENTE

SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE

DISPOSITIVO MEDICO

Data di ultima revisione:

04/03/2020

Date of last revision:


Smartbibi
NASAL
Decongestionante
in caso di Riniti

Soluzione salina
ipertonica Acido
ialuronico



Spray nasale

CE 0477 15 m e

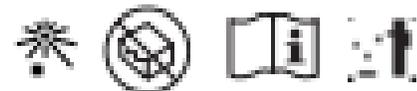

DISPOSITIVO MEDICO / MEDICAL DEVICE



Fabbricante/Manufacturer
GRICAR CHEMICAL srl

Via San Giuseppe, 18/20
Brugherio (MB)

15ml

GRICAR

LOT





Smartbibi NASAL

DISPOSITIVO MEDICO

Decongestionante in caso di Riniti

SMARTBIBI NASAL è uno spray nasale di soluzione salina ipertonica al 3%, con l'aggiunta di acido ialuronico. SMARTBIBI NASAL ha un'azione decongestionante sulla mucosa nasale oltre ad un effetto fluidizzante sul muco e aiuta il drenaggio delle secrezioni ed è quindi utile per mantenere puliti i passaggi nasali, soprattutto in caso di raffreddore, riniti allergica, rinosinusite e sinusite. SMARTBIBI NASAL è utile per migliorare il decorso post-chirurgica delle cavità nasali o il corso di rinosinusite acuta e nasofaringite.

MODALITÀ D'USO: Agitare prima dell'uso. Al primo utilizzo o dopo un prolungato periodo di inutilizzo, azionare più volte l'erogatore fino alla prima erogazione di prodotto. Per attivare l'applicatore, premere con 2 dita sulla base dell'erogatore.

- 1 nebulizzazione per narice fino a tre volte al giorno per bambini da 3 a 12 anni
- 1 o 2 nebulizzazioni per narice fino a quattro volte al giorno dai 12 anni in su

COMPOSIZIONE: Acqua, Sodio ialuronato, Cloruro di sodio, Acqua distillata di Timo, Potassio Fosfato Monobasico, Potassio Fosfato Bibasico, Potassio sorbato.

AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Non sono noti fenomeni di interazione con altri farmaci. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento, consultare il medico e informare il Fabbricante. In caso di ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti, evitare l'uso del prodotto. Se i sintomi persistono dopo 3-5 giorni consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore dopo l'uso. L'uso nei bambini deve essere effettuato con la supervisione di un adulto. In caso di gravidanza o allattamento, assumere il prodotto sotto controllo medico.

CONSERVAZIONE: Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce alla confezione integra e correttamente conservata. Conservare a temperatura ambiente evitandone l'esposizione a fonti dirette di luce e calore e/o ad un'eccessiva umidità ambientale; evitare il contatto con l'acqua. Una volta aperto utilizzare entro 1 mese

NATURALMENTE SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE

15ml



Smartbibi NASAL

MEDICAL DEVICE

Decongestant in the case of Rhinitis

SMARTBIBI NASAL is a nasal spray of hypertonic saline solution at 3%, with the addition of hyaluronic acid. SMARTBIBI NASAL has a decongestant action on the nasal mucosa in addition to a fluidising effect on the mucus. It helps the drainage of secretions and is therefore useful for keeping the nasal passages clean, especially in the case of cold, allergic rhinitis, rhinosinusitis and sinusitis. It is useful to improve the post-surgical course of the nasal cavities or the course of acute rhinosinusitis and nasopharyngitis.

HOW TO USE: Shake before use. At first use or after a prolonged period of inactivity, actuate the dispenser several times until the first product is dispensed. To activate the applicator, press with 2 fingers on the base of the dispenser.

- 1 nebulization per nostril up to three times a day for children from 3 to 12 years.
- 1 or 2 sprays per nostril up to four times a day up to 12 years old.

COMPOSITION: Water, Sodium hyaluronate, Sodium chloride, Thyme distilled water, Potassium Monobasic Phosphate, Potassium Bibasic Phosphate, Potassium sorbate.

WARNINGS: Avoid contact with eyes. Do not use if the package is open or damaged. There are currently no known interactions with drugs. In case of undesired reactions stop the treatment, consult the doctor and inform the Manufacturer. In case of hypersensitivity or individual allergy to one or more components, avoid using the product. If symptoms persist after 3-5 days consult a doctor. Keep out of reach of children. Do not dispose of the container after use. Use in children must be supervised by an adult. In case of pregnancy or lactation, take the product under medical supervision

STORAGE: Do not use after the expiry date indicated on the package; the expiry date refers to the unopened and properly stored package. Store at room temperature avoiding exposure to direct sources of light and heat and / or excessive environmental humidity; avoid contact with water. Once opened, use within 1 month.

NATURALLY LACTOSE FREE

GLUTEN FREE

15ml

FABBRICANTE / MANUFACTURED BY: Gricar Chemical S.r.l - Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MB) ITALY

 Fabbricante/Manufacturer
GRICAR CHEMICAL srl
Via San Giuseppe, 18/20
Brugherio (MB) - ITALY
e-mail: solulife@gricar.net

CE 0477

15 ml e



MEDICAL DEVICE/DISPOSITIVO MEDICO

Data di ultima revisione: 04/03/2020
Date of last revision:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XỊT MŨI SMARTBIBI NASAL



I. Mục đích

SMARTBIBI NASAL là một thiết bị xịt mũi chứa dung dịch muối ưu trương 3%, acid hyaluronic và nước cất cỏ xạ hương.

SMARTBIBI NASAL có tác dụng làm thông thoáng màng nhầy mũi và làm loãng dịch mũi. Sản phẩm giúp làm tăng tính lưu động của nước mũi, do đó giúp làm sạch mũi, đặc biệt trong các trường hợp cảm lạnh, viêm mũi dị ứng, viêm mũi họng, viêm xoang.

Dung dịch muối ưu trương 3% giúp sát khuẩn, chống viêm, chống phù nề.

Acid hyaluronic giúp giữ ẩm, làm dịu niêm mạc mũi bị kích ứng.

Có thể dùng sau phẫu thuật khoang mũi, hoặc trong các trường hợp viêm mũi, viêm hầu họng cấp.

II. Cách dùng

Lắc kỹ trước khi dùng. Lần sử dụng đầu tiên sau thời gian dài không sử dụng cần xịt vài lần để sản phẩm phân tán đều. Ấn 2 ngón tay vào cạnh vòi xịt để xịt.

Trẻ em từ 2 đến 3 tuổi: tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.

Trẻ em từ 3 đến 12 tuổi: 1 lần xịt mỗi bên mũi, có thể xịt tới 3 lần/ngày.

Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: 1 hoặc 2 lần xịt mỗi bên mũi, có thể dùng tới 4 lần/ngày

Sản phẩm không chứa chất làm co mạch, không làm khô niêm mạc mũi và không gây nghiện, do đó sản phẩm thích hợp để dùng cả ngày.

III. Chống chỉ định

Không dùng cho người mẫn cảm hoặc dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

CHÚ Ý: Không xịt vào mắt. Không dùng khi sản phẩm bị mở nắp hoặc vỡ. Chưa phát hiện có tương tác thuốc. Trong trường hợp gặp tác dụng không mong muốn, dừng sử dụng, hỏi ý kiến bác sĩ và thông báo với nhà sản xuất. Không dùng cho người mẫn cảm hoặc dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Nếu các triệu chứng không đỡ sau 3-5 ngày, tham khảo ý kiến bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em. Không phát tán bao bì sau khi sử dụng. Trẻ em phải dùng dưới sự giám sát của người lớn. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú chỉ dùng khi có sự giám sát y tế.

BẢO QUẢN: Không dùng sản phẩm hết hạn. Hạn dùng tương ứng với sản phẩm chưa bị mở nắp và được bảo quản đúng cách. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt trực tiếp, và nơi có độ ẩm cao. Sau khi mở, sử dụng trong vòng 1 tháng.

IV. Quy cách đóng gói:

Lọ thủy tinh 15ml có vôi xít.

V.Hạn dùng

Xem trên bao bì sản phẩm. không sử dụng sản phẩm quá hạn dùng.

Điều kiện bảo quản: nơi khô ráo,thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp